

VASKULÄR ACCESS

Intensivvård

arteriosel




Artärkateter  
med BLS-teknik



Value Life

Vid artärpunktion är pulsationer ett kvitto på att du befinner dig i en artär. Med arteriosel visualiseras dessa pulsationer i sidokanalen (se nedan). Arteriosels konstruktion medför att risken för blodspill med efterföljande blodexponering minimeras. I förlängningen innebär detta att uppkomst av blodsmitta förebyggs.

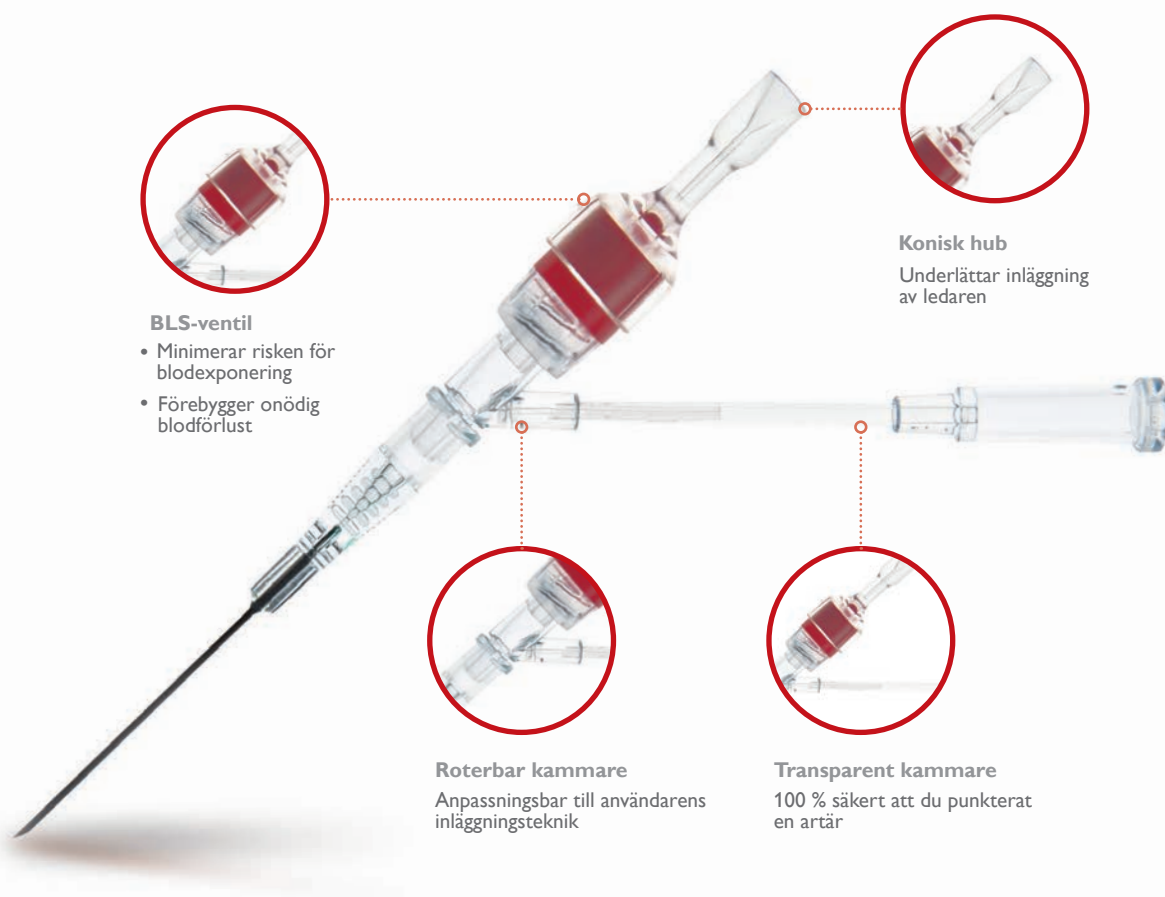

## Varför använda Seldinger teknik vid artärpunktion?

### Lättare att lägga in ...

- Den flexibla toppen på ledaren kan passera genom slingriga/tunna kärl.
- Arteriosklerotiska kärl tenderar ofta att rulla undan vid direktpunktion.

### ...utan att skada artären.

- Felpunktion innebär att hematombildas och omöjliggör ny punktion.
- Med arteriosel - mindre irritation och risk för trombosbildning.

Ökar dina chanser att lyckas vid första punktionsförsöket


**Beställning**
**leadercath arteriosel**

Art.nr		Int. Ø - Ext. Ø (mm)	G	Fr	Längd	Antal / kartong
<b>115.0901</b> leadercath arteriosel	arteriosel Punktionsnål	0.6 - 0.9	20	-	38 mm	20
	Artär- kateter	0.6 - 0.9	20	3	8 cm	
	Rak ledare	0.53	-	-	29 cm	

**leadercath arteriosel**

med förlängnings-slang och Autoflush (marknads

Art.nr		Int. Ø - Ext. Ø (mm)	G	Fr	Längd	Antal / Kartong
<b>115.6981</b> leadercath arteriosel  med förlängnings- slang och autoflush	arteriosel Punktionsnål	0.6 - 0.9	20	-	38 mm	20
	Artär- kateter	0.6 - 0.9	20	3	8 cm	
	Rak ledare	0.53	-	-	29 cm	
	Förlängnings- slang	-	-	-	10 cm	

**arteriosel kit**

Art.nr		Int. Ø - Ext. Ø (mm)	G	Fr	Längd / Dimensioner	Antal / kartong
<b>115.1201</b> arteriosel kit	arteriosel Punktionsnål	0.8 - 1.1	19	-	68 mm	5
	Artär- kateter	0.8 - 1.2	18	4	18 cm	
	Rak ledare	0.71	-	-	46 cm	
	10ml spruta	-	-	-	-	
	Förlängnings- slang	-	-	-	30 cm	
	Drapering	-	-	-	60 x 45 cm	
	3-vägs-kran	-	-	-	-	

För ytterligare information, vänligen kontakta: [info@vygon.se](mailto:info@vygon.se)

The specifications given in this brochure are for information only and are not, under any circumstances, of a contractual nature.

---

Vygon (Sweden) AB. Högströmsgatan 16 931 33 Skellefteå  
Tel: 0910-884 50. Fax: 0910-884 54. [www.vygon.se](http://www.vygon.se)



[www.vygon.com](http://www.vygon.com)