

Vaskulär access

Perifer venkateter



lifecath midline



Value Life

Ett alternativ till intravenös pvk


lifecath midline

Lifecath midline är en 20 till 25 cm perifer intravenös kateter, avsedd för patienter som behandlas med intravenösa läkemedel längre än 72 timmar.⁽¹⁾

Katetern är avsedd att placeras i en ven på armen, främst ovanför armvecket för att leverera icke kärlirriterande läkemedel (Osmolaritet <600 mOsm/l & pH mellan 5 och 9), antibiotika och smärtstillande läkemedel. Kateterns distala ände bör vara placerad i överarmen vid vena axillaris.⁽²⁾

Fördelar för patienter och sjukvårdspersonal

- Medger oavbruten behandling under lång tid⁽¹⁾
- Färre nålstick leder till minskad risk för stickskador för personalen⁽¹⁾
- Färre nålstick resulterar i friskare vener för patienten⁽¹⁾
- Eftersom katetern är placerad i en perifer ven finns inget behov av kontrollröntgen⁽¹⁾

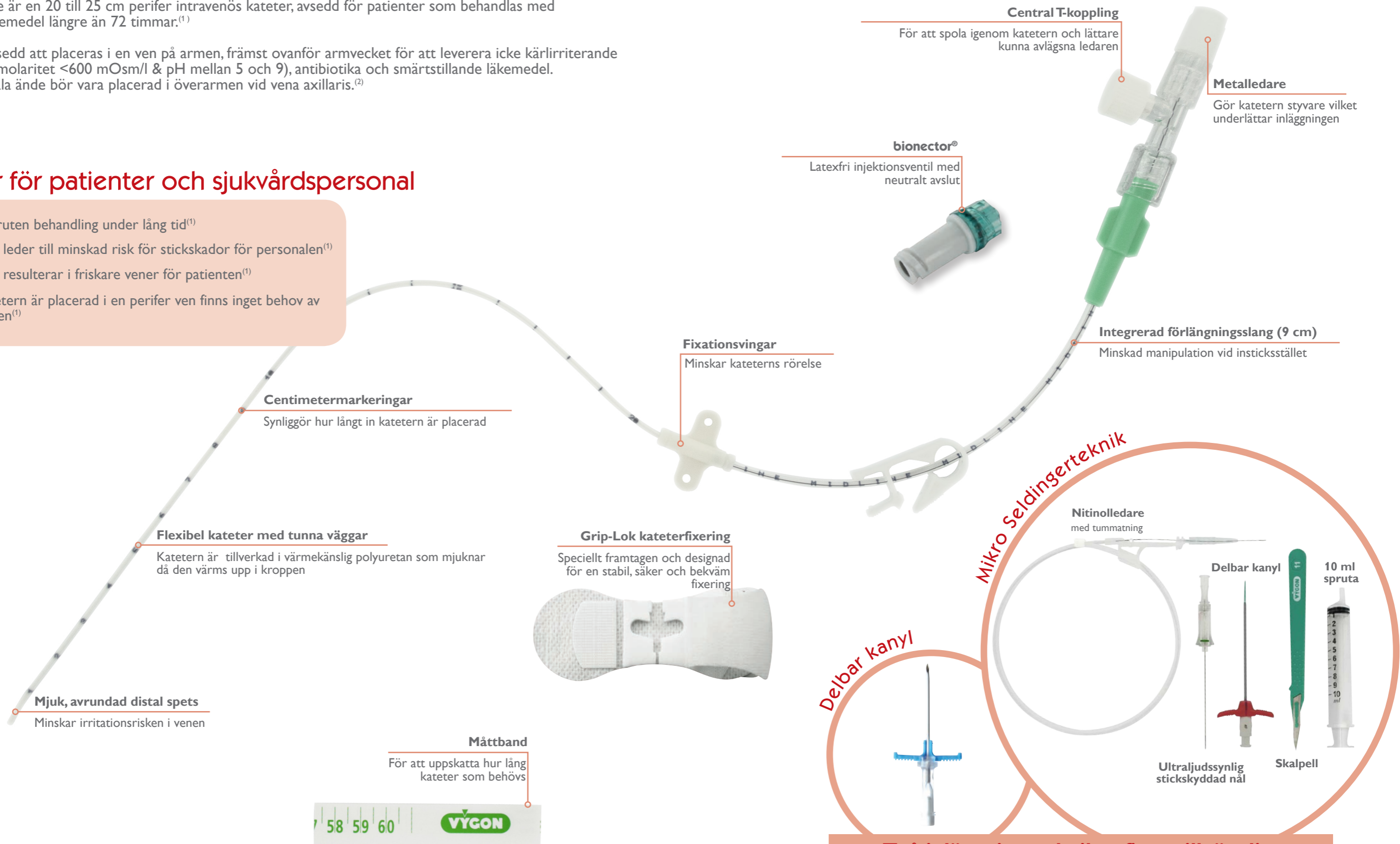

Två inläggningstekniker finns tillgängliga

- Midlineset för mikro Seldingerteknik

Art. nr	Kateter (polyuretan)						Introducer				Ledare		Antal/ förpackning
	Ø (Fr)	Längd (cm)	Antal lumen	Ø (mm)	Fyllnads- volym (ml)	Flödes- Hastighet (ml/min)	Punktionsnål		Delbar kanyl		Ø (mm)	Längd (cm)	
							Gauge	Längd (cm)	Ø (Fr)	Längd (cm)			
1296.113	3	25	1	1.00	0.45	3.5	21	7	3	7	0.46	50	10
1296.433	3	20	1	1.00	0.43	4.1	21	7	3	7	0.46	50	10
1296.114	4	25	1	1.35	0.48	19.5	21	7	4	7	0.46	50	10
1296.443	4	20	1	1.35	0.44	22	21	7	4	7	0.46	50	10
1296.345	4.5	25	2	1.50	0.35 (x2)	15 (x2)	21	7	4.5	7	0.46	50	10
1296.445	4.5	20	2	1.50	0.29 (x2)	21 (x2)	21	7	4.5	7	0.46	50	10
1296.453	5	20	1	1.67	0.59	71	21	7	5	7	0.46	50	10

- Midlineset med delbar nål

Art. nr	Kateter (polyuretan)						Introducer			Antal/ förpackning
	Ø (Fr)	Längd (cm)	Antal lumen	Ø (mm)	Fyllnadsvolym (ml)	Flödes- hastighet (ml/min)	Delbar kanyl			
							Ø (Fr)	Längd (cm)		
1296.245	4.5	25	2	1.50	0.35 (x2)	15 (x2)	5	3.2	10	
1296.142	4	20	1	1.35	0.44	22	4	3.2	10	
1296.13	3	25	1	1.00	0.45	3.5	3	3.2	10	
1296.14	4	25	1	1.35	0.48	19.5	4	3.2	10	
1296.15	5	25	1	1.67	0.63	66	5	3.2	10	



1. Journal of Infusion Nursing; Volume 34; Number 1S; January/February 2011; S37&S38.
2. CDC; Guidelines for the prevention of Intravascular Catheter-related Infections, 2011.

För mer information kontakta [Vygon info@vygon.se](mailto:info@vygon.se)

Informationen i denna broschyr skall endast ses som information och inte på några sätt ses som en avtalsförbindelse.